

A RAGYOGÓBB MOSOLYÉRT



WhitneyPHARMA

Eredményes fehérités a hatóanyag kombináció UV-fény általi aktiválásának köszönhetően.

A fogfehéritést kényelmesen és gyorsan otthonában is elvégezheti.



Napi 15 perc

Könnyű alkalmazási mód

Nem okoz fogérzékenységet

Alkalmazása nem igényel fogászati rendelői körülményeket

A hatóanyag kombináció UV-fény általi aktiválásának köszönhetően oxidáció következik be, amely elpusztítja a fogakon lévő szennyeződések és elpusztítja a baktériumokat, amelyek felelősek a fogak sárgulásáért.

A hatóanyag kombináció UV-fénnyel nem okoz fogérzékenységet.

... FOGFEHÉRÍTŐ SZETT

A WHITNEYPHARMA FOGFEHÉRÍTŐ SZETT ELŐNYEI:



- Hatóanyaga kíméletesen fehériti a fogakat
- Nem okoz fogérzékenységet
- Árnyalatokkal fehérebb fogak a 6 napos kezelés után
- Európai Unió CPNP regisztrációval rendelkezik
- Peroxidmentes
- Otthon alkalmazható

Kozmetikum

A WHITNEYPHARMA FOGFEHÉRÍTŐ SZETT TARTALMA:


- 3x3 ml fecskendő fehéritő géllal
- 1x UV-lámpa
- 1x fogsín
- 1x használati útmutató
- 1x fogszínskála

Használati útmutató:

1. Használja 6 egymást követő napon, ideális esetben az esti szájhygiéna után, lefekvés előtt, 15 percig minden alkalommal.
2. A fogfehérítés megkezdése előtt hasonlítsa össze a fogak eredeti árnyalatát a mellékelt fogszínskála segítségével.
3. Távolítsa el az UV-lámpa elem védőfóliáját és csatlakoztassa a fogsínt az UV-lámpához.
4. Nyomja a fecskendő egynegyedét egyenesen a fogsín felső részébe, a másik negyedét pedig az alsó részébe.
5. Ezután helyezze be a szájába, harapjon rá, és kapcsolja be az UV-lámpát.
6. 15 perc elteltével a lámpa magától kikapcsol.
7. Ezután vegye ki a fogsínt, és öblítse le langyos vízzel.



Javasoljuk, hogy utána ismét tisztítsa meg fogait.

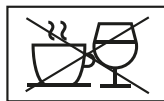

A fogfehérítés után legalább 30 percig csak tiszta vizet igyon.



A fogfehérítés után legalább 30 percig ne fogyasszon ételt.

A maximális és hosszan tartó hatás érdekében javasoljuk a fehéritő kezelést néhány hét múlva szükség szerint megismételni.

www.whitney.hu